

DiaPro®

Ürün Kataloğu



diapro.com.tr




Dia Pro®

1983'ten beri faaliyet gösteren grubumuzun en genç ve en dinamik üyesi olan **Dia Pro Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.**, jel teknolojisine dayalı son jenerasyon İmmünohematoloj Kit ve ekipmanları üretmek hedefiyle 2007'de kurulmuştur.

Bu amaca yönelik tasarlanmış tesisinin inşası 2007 yılında başlamış ve 22 ayda tamamlanmıştır. 4500 m2 kapalı alan üzerine kurulu olan fabrikamız, Class B & C temiz odaları içeren üretim ve laboratuvar alanları, standartlara uygun sıcaklık kontrollü depolar, bakım ve teknik servis departmanları içermektedir.

Firmamız kurulduğu günden bu yana en yüksek üretim standartlarını benimsemiş ve **Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği** kurallarına göre MDD 98/79 / ATM kapsamında ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012 direktifleri uyarınca üretimini geliştirerek CE belgesi almaya hak kazanmıştır. 2012 yılında zorlu bir 5 yıllık Ar-Ge süreci tamamlandıktan sonra, Across Gel® kart ve Across System® ekipmanlarının lansmanı yapılmıştır. Türkiye'deki jel santrifüj kart ve ekipmanlarının ilk üreticisi olan Dia Pro, bu alanda dünyanın tanınmış şirketlerinden biri haline gelmiştir.


Dia Pro, Türkiye'de immünohematoloji ürünlerinin dünya standartlarında bir üreticisi olmakla birlikte teknolojik yenilikleri takip ederek konumunu korumaya kararlıdır.

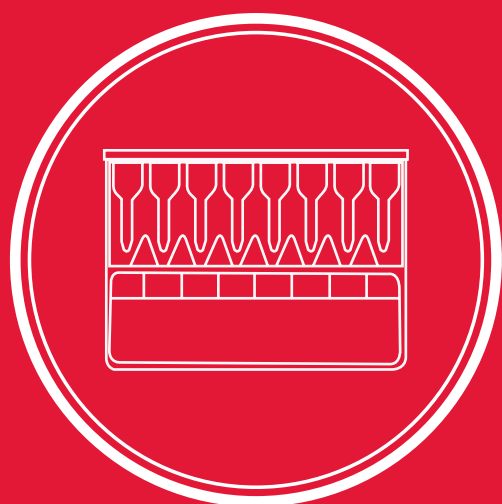

• Jel Santrifügasyon Test Kartları • RBC Hücre Setleri • Yardımcı Solüsyonlar

Across Gel® Forward & Reverse ABO with Dvı-/Dvı+

Ref. No: 810201 ▶ 50 Kart

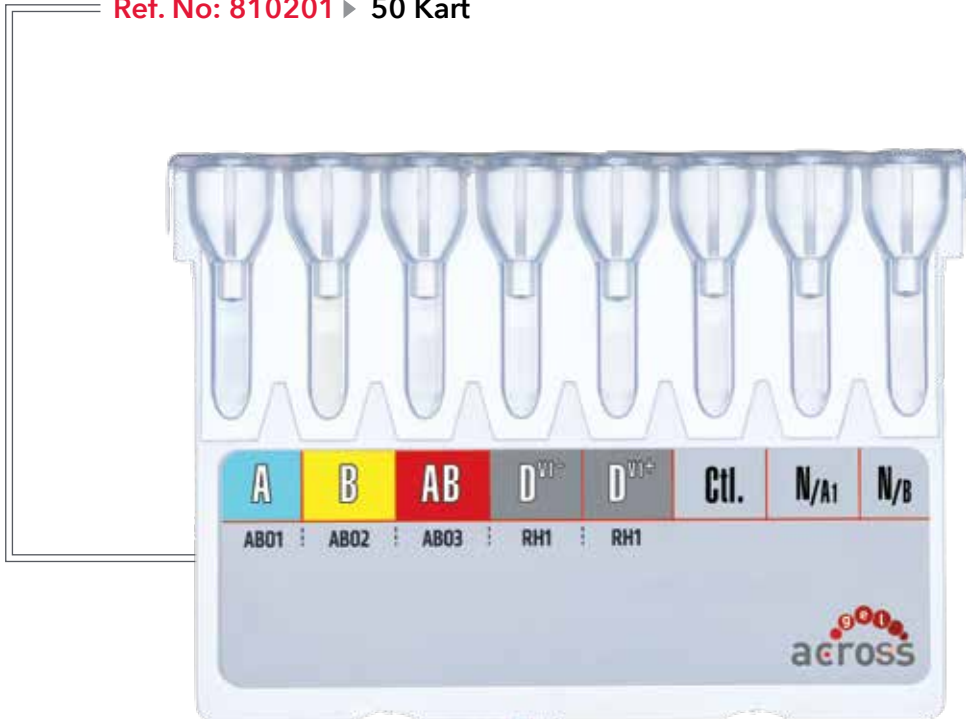

Across Gel® Forward & Reverse ABO with Dvı-/Dvı+
Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırma ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

- Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit yüzeyinde olmayan antijene karşı serum/plazmadaki karşıt antikorların, Across RBC A1/B ürünleri ile birlikte tespitini,

- Dvı- ve Dvı+ mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Rh (D) ile Zayıf D/Parsiyel D antijenlerinin tespitini sağlayacaktır.


Geniř test parametreleri
**kolaylık ve zaman
kazandırır!**



Across Gel® ABO Typing

Ref. No: 810208 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811208 ▶ 10 Kart

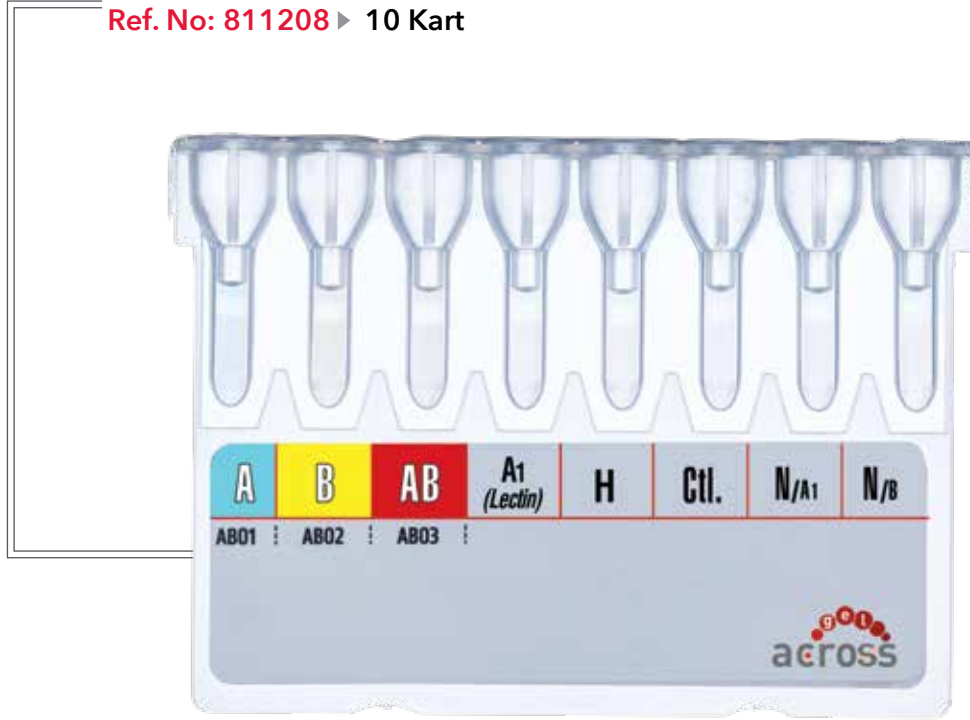


Across Gel® ABO Typing

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB ile Lectin A1, AntiH mikrotüpleri içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırmada ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,


- Reverse Gruplandırma testini aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ile N/B mikrotüpleri kullanarak Eritrosit yüzeyinde olmayan antijene karşı serum/plazmadaki karşıt antikorların, Across RBC A1/B ürünleri ile birlikte tespitini sağlayacaktır.

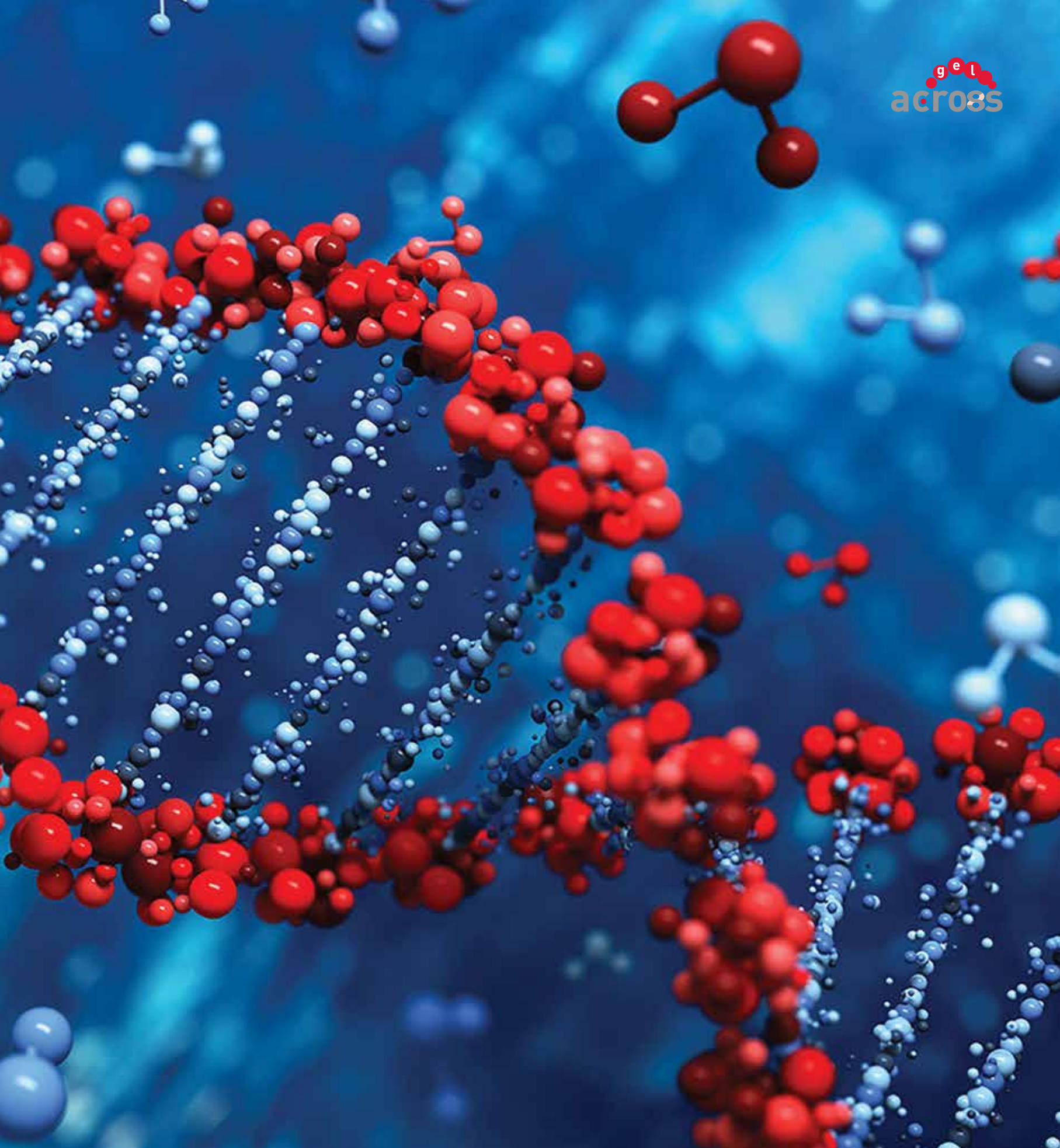

Across Gel® Newborn

Ref. No: 810213 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811213 ▶ 10 Kart

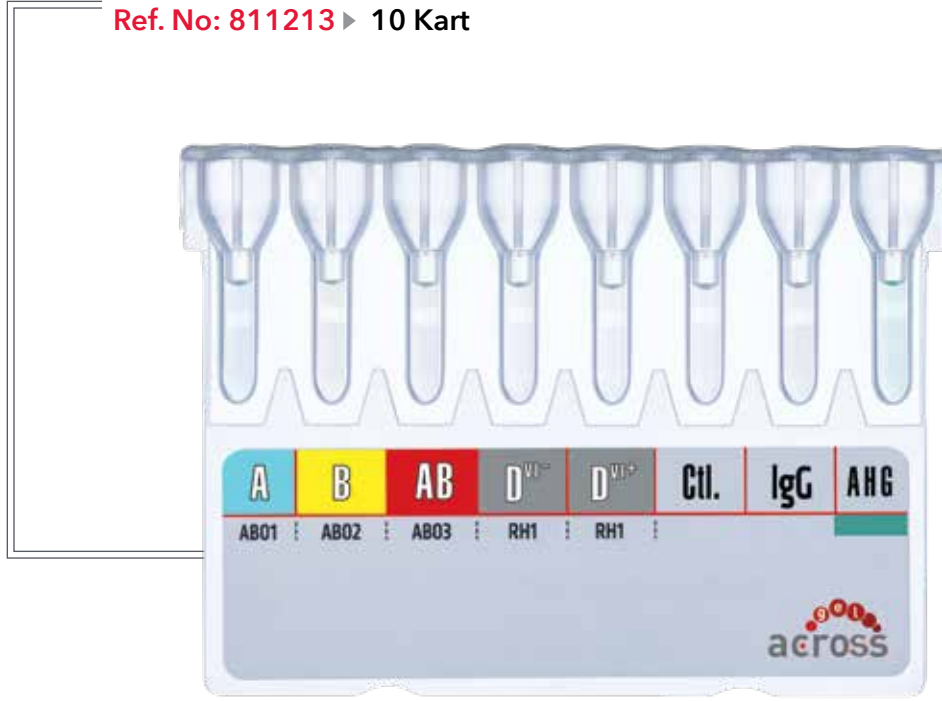

Across Gel® Newborn

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- A, B, AB mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile Forward gruplandırma ABO ile ABO varyasyonlarının tespitinde,

- D_{VI}- ve D_{VI}+ mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlarda Rh (D) ve Zayıf D/Parsiyal D antijenlerinin tespiti ile Rh (D) uyumsuzluklarının tespitinde bir adım daha önde olmanızı sağlar.


- Monospesifik IgG ve Polispesifik AHG mikrotüplerinin içerisinde yer alan özellikli antikor yapısı ile yenidoğanlara gereken önemi veriyoruz.

Yenidoğan eriškinin küçüğü deęildir.
Onlara gerekli özeni göstermeliyiz.



Across Gel® Cross Match

Ref. No: 810217 ▶ 50 Kart

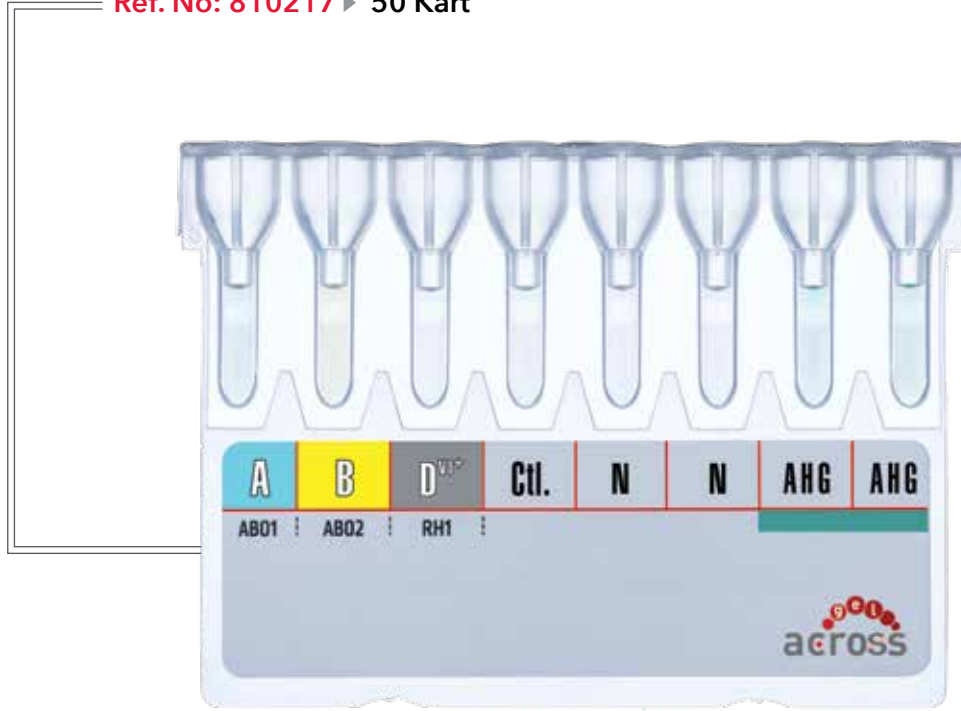

Across Gel® Cross Match

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

- Transfüze edilecek olan kan ürünlerinin kabul edilen en uzun sürede canlılığını ve fonksiyonunu sürdürmesini sağlamak amacı ile,

- Alıcının eritrositlerinde herhangi bir yıkımın olmasını engellemek için eş zamanlı olarak alıcı ve vericinin ABO/Rh (D) kan grubu kontrolünü,
- Enzimli ve Coombs'lu ortamlarda major ve minor cross match (tam kan için) veya major cross match ile hastanın otoantikor testlerini (eritrosit süspansiyonu için) **"Tek kart"** üzerinde yapmanıza olanak sağlar.

**Ar-Ge'mizi ihtiyalarınıza
gre řekillendiriyoruz.**



Jel Santrifügasyon Test Kartları



Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dvi-/CDE

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra C ve E antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810202 ► 50 Kart




Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dvi+/CDE

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin yanı sıra C ve E antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810203 ► 50 Kart

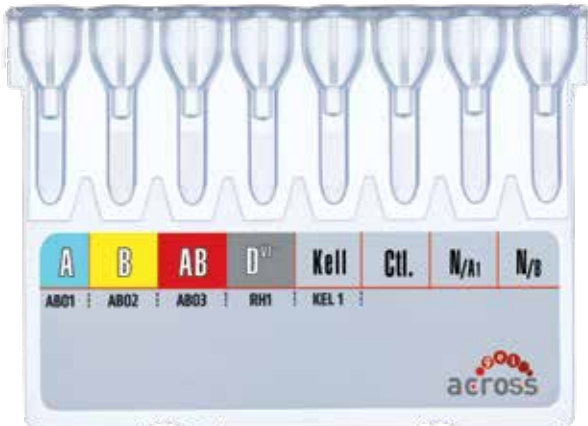

Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dvi-/Kell

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin yanı sıra Kell antijeninin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810204 ► 50 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları




Across Gel®

Forward & Reverse ABO with Dv1+/Kell

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B,AB mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde, Reverse gruplandırma için aynı kart üzerinde yer alan N/A1 ve N/B mikrotüpleri sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin yanı sıra Kell antijeninin varlığını kontrol edebilir.

Ref. No: 810205 ► 50 Kart

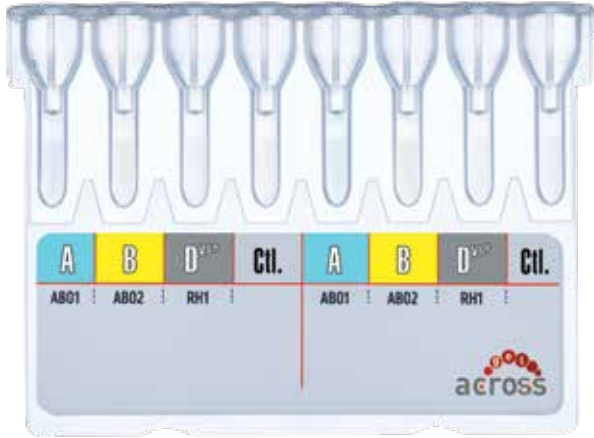


Across Gel®

Double ABO/Dv1+

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin varlığını kontrol edebilir. Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No:v 810206 ► 50 Kart

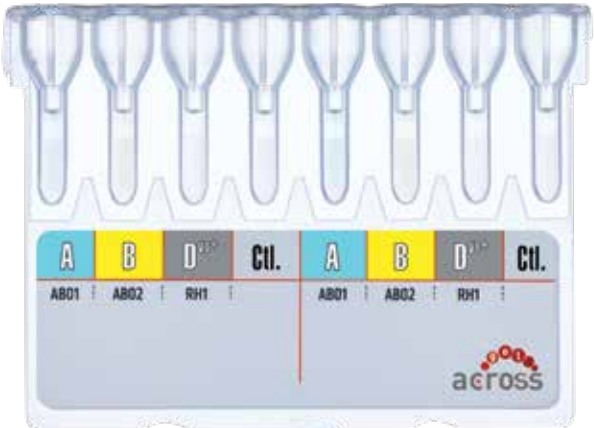

Across Gel®

Double ABO/Dv1-

Forward gruplandırma için kart üzerinde yer alan A,B mikrotüpleri ABO ve ABO varyasyonlarının tespitinde sizlere yardımcı olacaktır. Rh gruplandırmasında Rh(D) antijenlerinin varlığını kontrol edebilir. Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810207 ► 50 Kart

Jel Santrifüstasyon Test Kartları



Across Gel®

Rh Phenotyping with Kell (K)

Rh ve Kell sistemi antijenlerini detaylı olarak tiplendirebilen, kontrol mikrotüpü ile hatalı sonuçları en aza indiren bu kart, sık transfüzyon uygulanan hastalara en uygun kanı kolayca bulmanıza olanak sağlamaktadır.

Ref. No: 810209 ► 50 Kart

Ref. No: 811209 ► 10 Kart



Across Gel®


Rh Phenotyping

Rh sistemindeki C, c, E, e antijenlerinin tespitine olanak sağlamaktadır.

Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810210 ► 50 Kart

Ref. No: 811210 ► 10 Kart

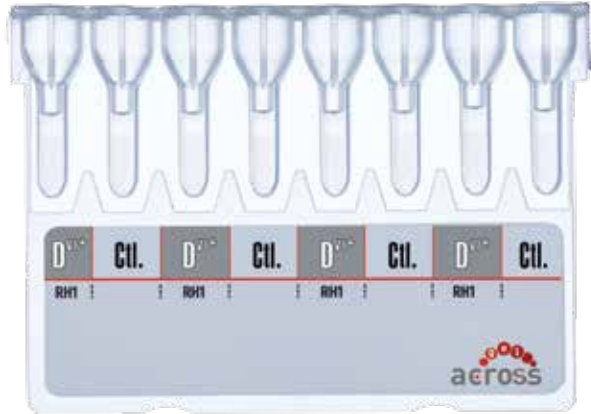

Across Gel®

Anti-D⁺


İmmünizasyon riski yüksek olan Rh(D) ve Zayıf D / Parsiyel D antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810211 ► 50 Kart

Ref. No: 811211 ► 10 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

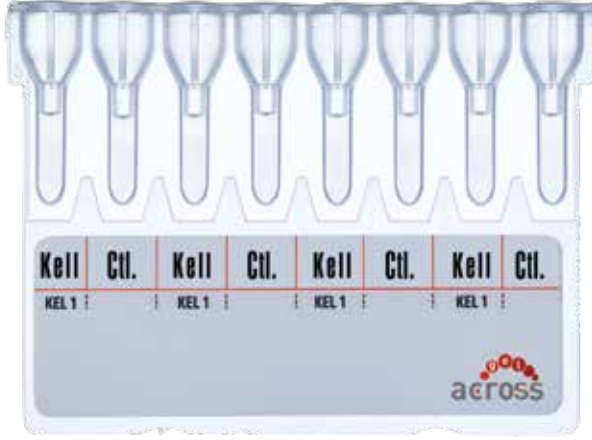


Across Gel®

Anti-Kell

Rh (D) antijeninden sonra antikor oluşturma riski en yüksek olan Kell antijenini tespit edebilmek için kullanılır. Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810212 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811212 ▶ 10 Kart

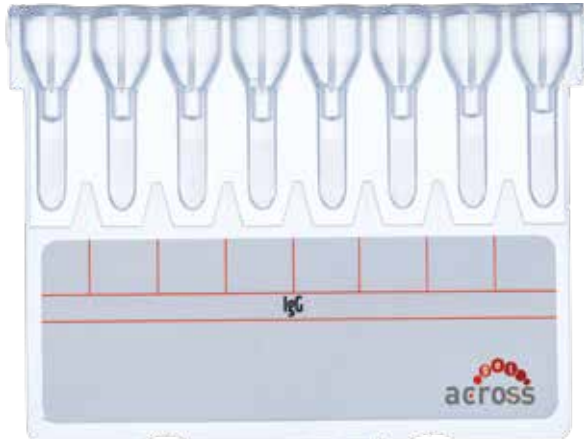


Across Gel®

Anti-IgG

Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde kullanılabilecek Monospesifik IgG reaktifli ortam sağlanmaktadır.

Ref. No: 810214 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811214 ▶ 10 Kart

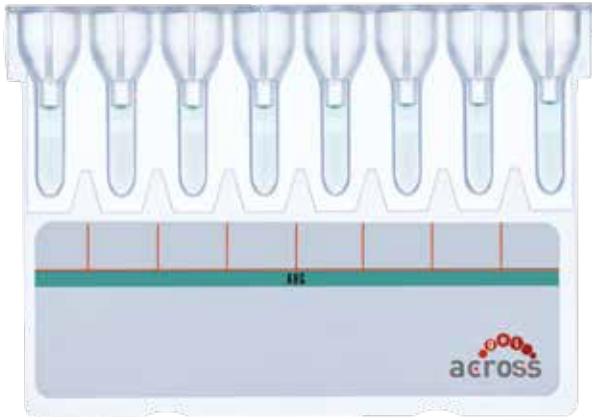

Across Gel®


AHG (IgG+C3d)

Direkt Coombs, indirekt Coombs, Antikor Tarama, Antikor Tanımlama, Cross Match, Oto Kontrol, Zayıf D/Parsiyel D ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirme testlerinde kullanılabilecek Coombs reaktifli ortam sağlanmaktadır.

Ref. No: 810215 ▶ 50 Kart

Ref. No: 811215 ▶ 10 Kart

Jel Santrifügasyon Test Kartları

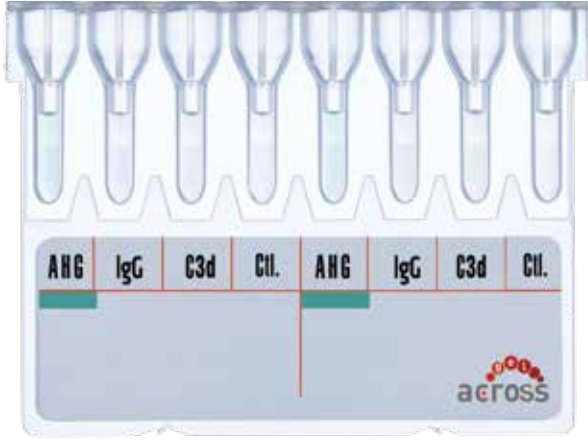


Across Gel®

Monospecific Direct Coombs (DAT)

Direkt Coombs testleri için Polispesifik AHG ile Monospesifik IgG ve C3d reaktifli ortamlar sağlamaktadır. Bir kartta iki test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810216 ► 50 Kart

Ref. No: 811216 ► 10 Kart

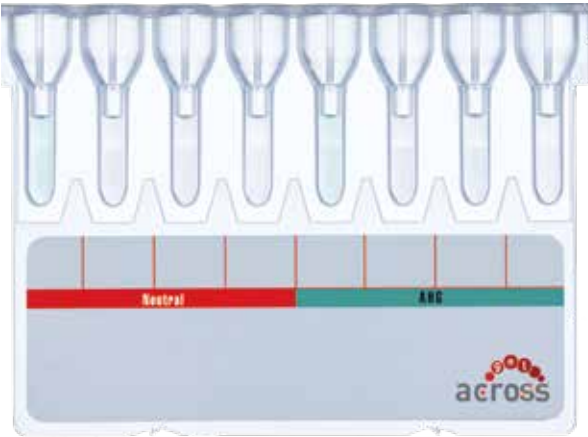


Across Gel®

Neutral/Coombs

Serum/plazmada bulunan oto ve allo antikorların Enzim ve Coombs yöntemleri ile tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ref. No: 810218 ► 50 Kart

Ref. No: 811218 ► 10 Kart

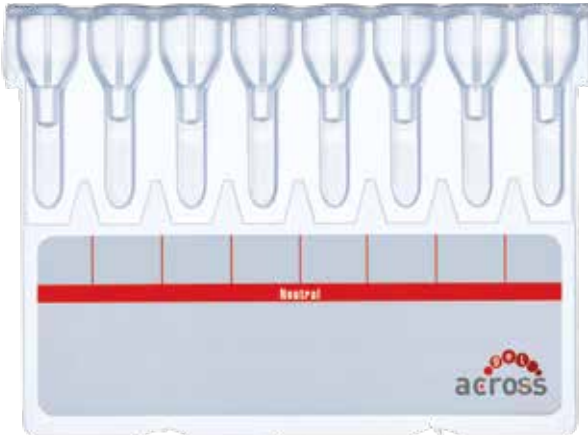


Across Gel®

Neutral

Reverse gruplama, Enzimli ortamda Antikor Tarama ve Tanımlama, Soğuk Aglutinin testi, isoaglutinin titresi ve diğer sistem antijenlerinin tiplendirilmesi için kullanılabilecek Nötral mikrotüplerini içermektedir.

Ref. No: 810219 ► 50 Kart

Ref. No: 811219 ► 10 Kart

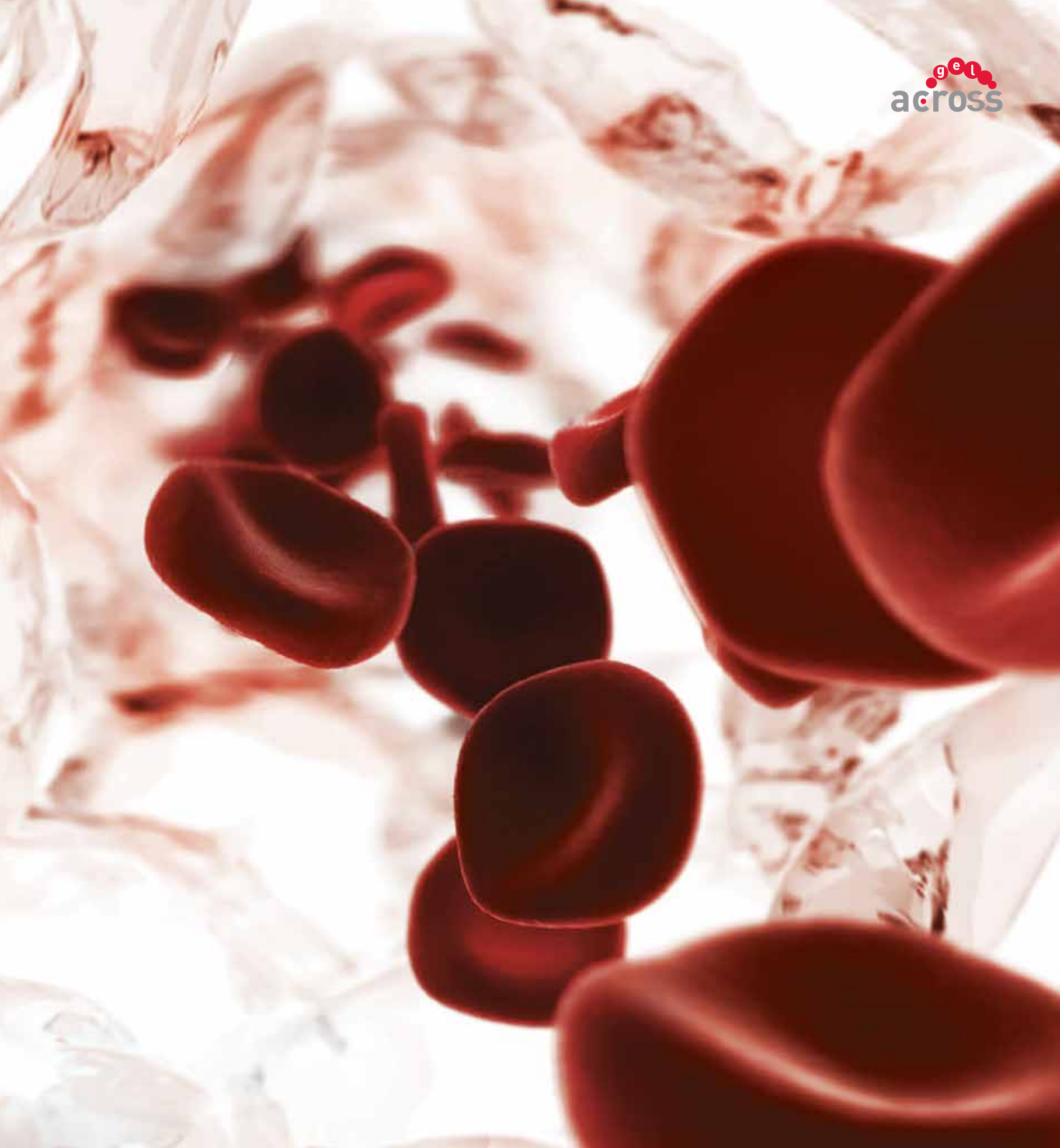

RBC Hücre Setleri



Across Gel®

RBC A1/B

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglutininlerinin, varlığı bilinen A1 ve B kırmızı kan hücre reaktifleri kullanılır.

Ref. No: 820101 ▶ 2 x 10 ml.



Across Gel®

RBC A1/A2/B/O

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglutininlerinin, varlığı bilinen A1, A2, B ve O kırmızı kan hücre reaktifleri kullanılır.

Ref. No: 820102 ▶ 4 x 10 ml.



Across Gel®

Cell Screen 2

Across Screen Cell 2 hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için kullanılır.

Ref. No: 820103 ▶ 2 x 10 ml.

RBC Hücre Setleri



Across Gel® Cell Screen 2P

Across Screen Cell 2P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması için kullanılır.

Ref. No: 820104 ► 2 x 10 ml.



Across Gel® Screen Cell 3

Across Screen Cell 3 hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için kullanılır.

Ref. No: 820111 ► 3 x 10 ml.



Across Gel® Screen Cell 3P

Across Screen Cell 3P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması için kullanılır.

Ref. No: 820112 ► 3 x 10 ml.

RBC Hücre Setleri



Across Gel® Cell Screen 4

Across Screen Cell 4 hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda taranması için kullanılır.

Ref. No: 820105 ► 4 x 10 ml.



Across Gel® Cell Screen 4P

Across Screen Cell 4P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda taranması için kullanılır.


Ref. No: 820106 ► 4 x 10 ml.



Across Gel® Identi Cell

Across Identi Cell hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Anti-insan globulinli (AHG) ortamda tanımlanması için kullanılır.

Ref. No: 820107 ► 11 x 5 ml.

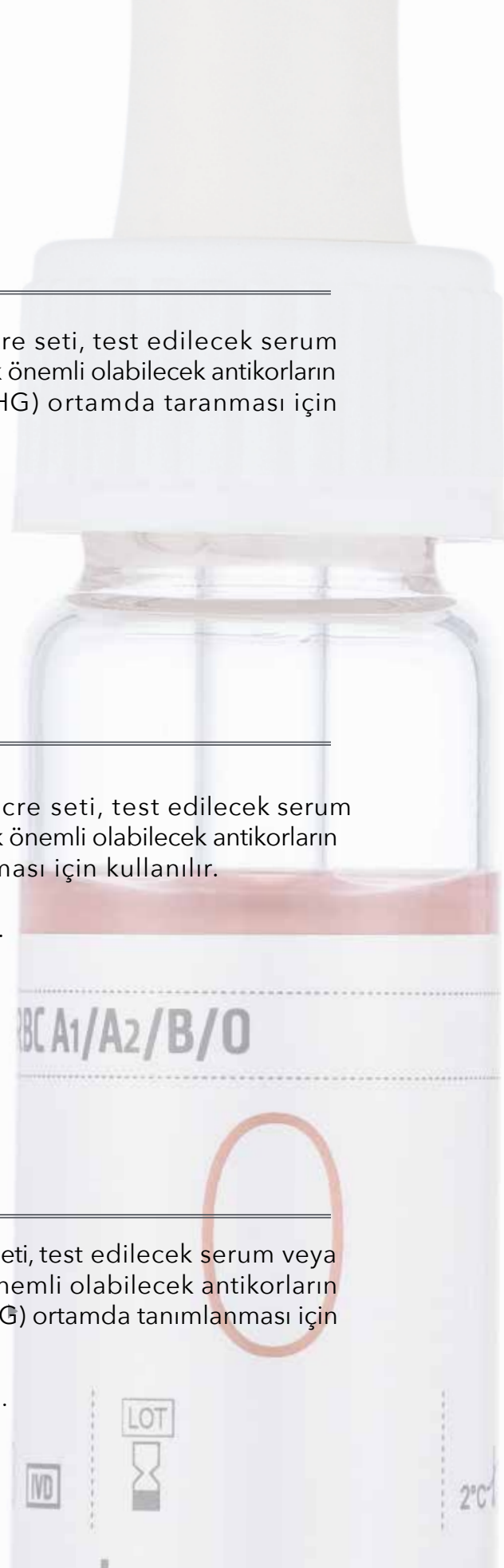

RBC Hücre Setleri

Across Gel® Identi Cell P

Across Identi Cell P hücre seti, test edilecek serum veya plazmada klinik olarak önemli olabilecek antikorların Enzim' li ortamda tanımlanması için kullanılır.

Ref. No: 820108 ► 11 x 5 ml.

Across Gel® RBC Coombs Control

Across RBC Coombs Control, içersinde anti-D ile sensitize edilmiş kırmızı kan hücreleri ile Coombs testlerinin kontrolü için kullanılır.

Ref. No: 820109 ► 1 x 10 ml.

Across Gel® Quality Control

ABO / Rh (D) gruplandırması, Rh fenotipi ve K antijeninin saptanması ve düzensiz antikorların taranması ile kapsamlı kalite kontrolünde kullanılır.

İç kontroller, yerel ve ulusal kurallara uygun olarak düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Beklenen test sonuçları elde edildiğinde, test prosedürleri doğru bir şekilde uygulanıyor, reaktif ve ekipmanlar doğru sonuç veriyor demektir. Eğer beklenmeyen sonuçlar gözlenirse, hasta test sonuçları vermeyi durdurup, hatalı sonucun kaynağını tespit edebilirsiniz.

Ref. No: 820110 ► 4 x 4 ml.

Yardımcı Solüsyonlar



Across Gel® LISS

Across LISS solüsyonu, Across Gel kartlarından kullanılacak olan eritrosit süspansiyonlarının hazırlanmasında kullanılır.

Ref. No: 830100 ► 100 ml.

Ref. No: 830500 ► 500 ml.



Across Gel® Bromeline

Across Bromelin solüsyonu, Across Gel Kartlarında Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk (Cross-Match) testleri için kullanılır.

Ref. No: 830400 ► 25 ml.

Ref. No: 830200 ► 100 ml.

Yardımcı Solüsyonlar



Across Gel® Wash A, B, O

"In vitro" diagnostik cihazlarının iç yıkaması için kullanılır.


- Ref. No: 830600 ► Wash A 500 ml.
- Ref. No: 830700 ► Wash B 500 ml.
- Ref. No: 830800 ► Wash O 500 ml.



Across Gel® Papaine

Across Papaine solüsyonu, Across Gel Kartlarında Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk (Cross-Match) testleri için kullanılır.

- Ref. No: 830300 ► 10 ml.

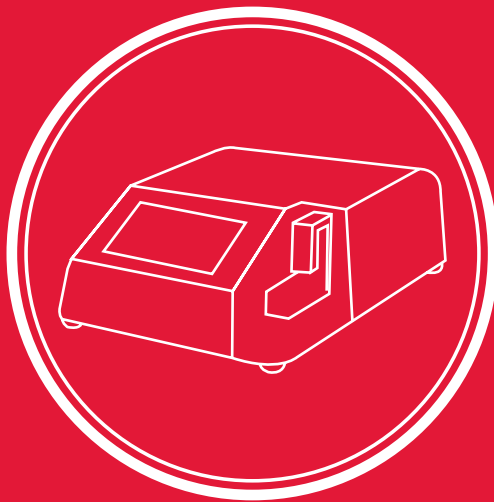

- Manuel Sistem • Otomatik Sistem

Manuel Sistem



Across System® Pipette

- Tek çekimle 50 x 8, 25 x 16 10 x 40 mikrolitre kapasitesi ile pipetleme
- Kullanılan pipet ucu sayesinde t est tüplerinin tabanına kolay ulaşım
- Tek kullanımlık pipet uçları hızlı ve güvenli bir şekilde çıkartılabilir
- Ergonomik tasarım ile sağ - sol elle kullanıma uygundur

Ref. No: 900120



Across System® Dispenser

- Hızlı ve güvenilir kullanım
- 100 ml ve 500 ml şişeler ile kullanabilme

Ref. No: 900130



Across System® Workstation

- 12/18/24 adet Across Gel® kart kapasiteli
- Bir adet 100 ml Across LISS alanı
- Bir adet 500 ml Across LISS alanı
- Bir adet 25 ml Across Bromelin alanı
- Sekiz adet RBC şişe alanı
- 36/54/72 adet süspansiyon hazırlama tüp alanı
- Sağ ve Sol el ile çalışmaya uygun hareketli yükleme

Ref. No: 900140



Across System® Card Centrifuge



- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across Gel® kartlar için optimize edilmiş hız ve süre ayarlıdır.
- Dengesiz yükleme, elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.
- Dijital ekranda kalan işlem süresi ve santrifüj hızı gösterebilmektedir.
- Çıkarılabilir ve değiştirilebilir rotor ve kart yuvaları

Ref. No: 900100



Across System® Card Incubator


- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across System® Card Incubator sahip olduğu 12 adet Across Gel® kart kapasiteli 2 ayrı blok birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir.
- Across Gel® kartları için önceden ayarlanmış 37 °C sıcaklık derece ve 15 dakikaya ayarlıdır. istenilmesi durumunda sıcaklık ve süre değiştirilebilir.
- İki ayrı blok için tasarlanmış olan dijital ekran üzerinde kalan işlem süresini ve sıcaklık değerlerini göstermektedir.
- Elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.

Ref. No: 900110



Across System® Kart Okuyucu

Ref. No: 900160

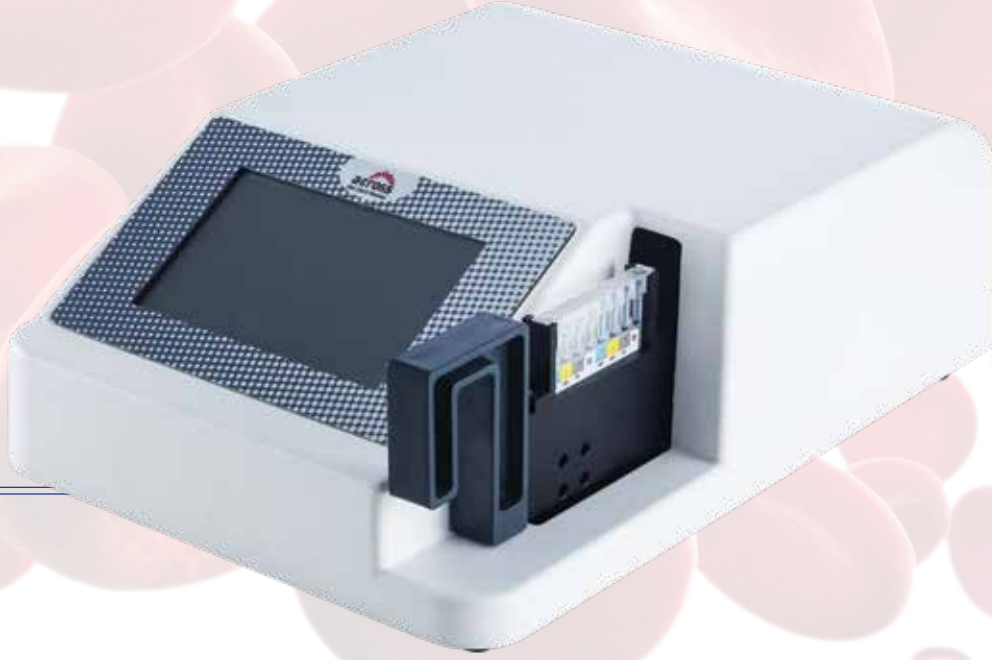

Genel Özellikler

- Across System® Card Reader özel işletim sistemi ile benzersiz kompakt tasarıma sahip olup en küçük alanlarda kendine yer bulabilmektedir.
- Across System® Card Reader sahip olduğu yazılım sayesinde; Across Gel® kartlarının barkodlarından kart ve test türünü algılayarak yorumlamayı otomatik olarak kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştirebilmektedir. Across System® Card Reader sahip olduğu CCD kamera sayesinde Across Gel® kartlarının orijinal görüntüsü üzerinden mikrotüpler içerisindeki aglütinasyonları algılayabilmektedir.

- Across System® Card Reader, otomatik olarak gerçekleştirdiği Across Gel® kart/test değerlendirmesi istenilmesi durumunda DOKUNMATİK EKRANI ile kullanıcı müdahalesine izin vermektedir.
- Across System® Card Reader'ı otomasyon sistemlerine çift yönlü olarak bağlayabilirsiniz. İstemeniz durumunda test sonuçlarınız ile birlikte Across Gel® kart görüntüsü de otomasyon sistemine aktarabilirsiniz.



Kart Barkod No: 820106181180165560 01.01.2017 **Geri**

Hasta Adı Soyadı: Donör Adı Soyadı:
Barkod: Barkod:
Hasta-2:

Test : Across Gel® Forward Reverse ABO with Dvi-/Dvi+
Sonuç : AB RH Negative

Kaydet

Adı Soyadı/
Barkod: hasta-23 **Geri**

Test Adı:

Tarih: 02.01.2017 05.01.2017 **Bul**

Lis **Düzenle** **Temizle** **Rapor** **Sonuç** **Oku**

☐ Tutarlı Değ.

Seç	Adı Soyadı/Barkod	Sonuç	Tarih
☒	hasta-23	Indirect Coombs Positive	05.01.2017

Hızlı Ve Kolay Yönetim

- Tek tık ile otomasyona veri gönderimi.
- Üstün arşivleme yeteneği ile tüm çalışmalarınız güvenli bir şekilde saklamaktadır. Belirlenen tarih içerisinde hasta / hastaların bir veya birden fazla test sonucuna ulaşılabilir.

- Test sonuçlarını istenilirse Across Gel® Kart görüntüsü ile alınabileceği gibi sadece rapor formatında da alınabilir.
- Across System® Card Reader sahip olduğu çoklu dil tercihi ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmete bir tık ile ulaşabilirsiniz.
- Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.

Across Auto System octo-m



KAPASİTE

- 200 adet Across Gel® kart yükleme alanı
- 6 x 16 numune yükleme alanı
- 12 RBC yükleme alanı
- 4 adet 100 ML Across LISS ve/veya Bromelin alanı

- 3 adet 96 çukurlu dilüsyon plak alanı
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
- Atık kabı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sahip olduğu bağımsız 2 (iki) adet prob ile aynı anda iki testin birlikte çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- Across Auto System octo-m cihazı test prosedür işlemlerinin tüm basamaklarını Walk-Away olarak gerçekleştirebilmektedir.
- Across Auto System octo-m cihazı tasarımı sayesinde çalışma esnasında testlerin durdurulmasına gereksinim olmadan sürekli yükleme özelliğine sahiptir.

- Random Access çalışabilme özeliği ile farklı testleri aynı anda yüklemenize olanak verir.
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör ve 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj bölümlerinin sahip olduğu sezgisel yazılım ile testlerinizin en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.
- Opsiyonel RBC soğutma bloğu ile hücreleriniz daha uzun süre stabil kalmasını sağlayacaktır.
- 98/79 / EC numaralı IVD direktifi uyarınca CE uyumlu



SERVİS DESTEĞİ

Ulusal ya da uluslararası satış sonrası yüksek kaliteli hizmet ve destek için, Dia Pro ya da yetkili distribütör ile doğrudan irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.



Ref. No: 900200

Kullanıcı dostu octo-m





- Sahip olduğu kart okuyucusu ile çalışmış olan testlerin orijinal renkli görüntüleri üzerinden sonuçlarını otomatik olarak değerlendirmektedir.
- Çift yönlü otomasyon bağlantısı ile hataların oluşmasına izin vermemektedir.
- Öncelikli numune/numunelere farklı bir açıdan bakarak Acil Numune ve Stat Numune giriş özelliği ile farklılık yaratmaktadır.
- Sisteme erişim parola denetimi ile yapılmakta olup, test sonucunda ikinci kez yapılan değişikliklerde, değişikliği sağlayan ID ve işlemin yapıldığı tarih ve zaman dilimlerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

- Gerçek zamanlı olarak yüklü olan testlerin durumu ve kalan süreleri hakkında gerekli bilgileri sunmaktadır.
- Geniş test paneline sahip olması yanında istenilen yeni test panellerine hızlı cevap verebilmektedir.
- Refleks Test özelliği ile Zayıf D/ Parsiye D, Lectin A1-Anti H, Anitkor Titrasyon v.b. testleri otomatik olarak çalışabilmektedir.
- İstenilen tarihler içerisinde tek veya çoklu test türlerine göre sayısal rapor verebilmektedir.
- Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.
- Kullanılmakta olunan ülkenin dilinde çalışabilme özelliğine sahiptir.
- Saatte ortalama 360 test hızına sahiptir.

TEST YÖNTEMLERİ

- Forward Gruplandırma
- Forward & Reverse Gruplandırma
- Reverse Gruplandırma
- Rh ve Rh alt Gruplandırma
- Direkt Coombs
- Cross Match
- Antikor Tarama
- Antikor Tanımlama
- Antikor Titrasyon
- Zayıf D / Parsiyel D
- Minör Antijen Testleri

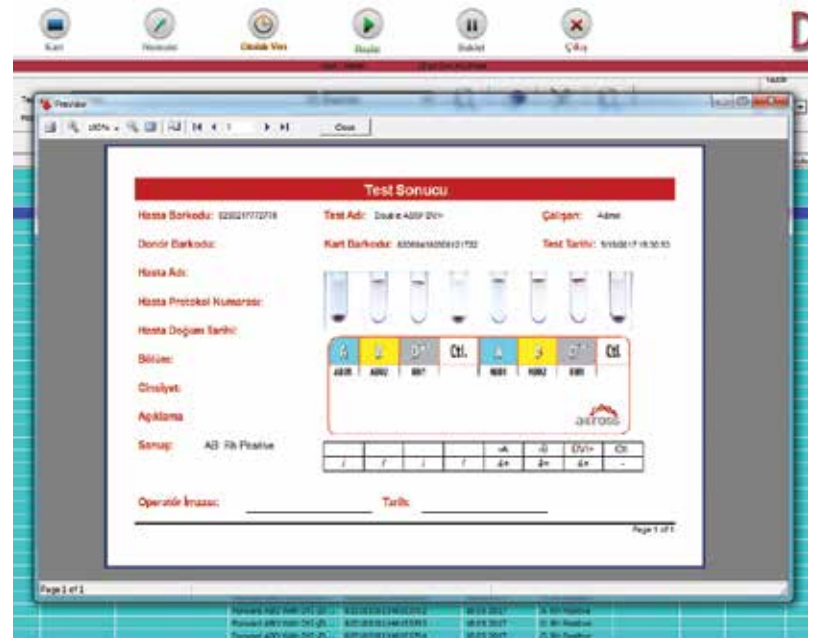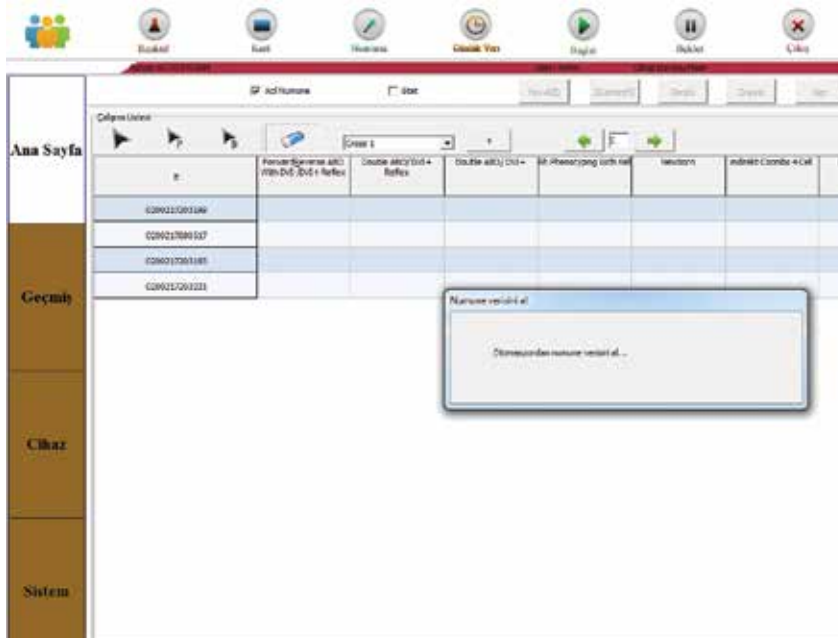

REAKSİYON DEĞERLENDİRME TABLOSU



4+

Aglütine hücreler kolonun üst kısmında görünüyorsa.



3+

Kolonun üst yarısında orta büyüklükte aglütinasyon görünüyorsa



+/-

Kolonun alt yarısında eser miktarda küçük boyutlu aglütinasyon görünüyorsa



Hemoliz

Kolon boyunca aglütinasyon görünmüyorsa ve kolon boyunca kırmızımsı renk görünüyorsa



İHTİYACINIZ İMMUNOHEMATOLOJİ İSE YANINIZDAYIZ



2+

Kolon boyunca küçük veya orta büyüklükte aglütinasyon görünüyorsa



1+

Kolonda az miktarda ve küçük boyutlu aglütinasyon görünüyorsa.



Ç.P

Çift popülasyon (kolonun tabanında ve üst kısmında kırmızı kan hücrelerinden oluşmuş çift band)



—

Kırmızı kan hücrelerinin bandı kolonun tabanıdaysa ve kolon boyunca aglütinasyon görünmüyorsa.

Notlar

DiaPro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / Head Office

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: diapro@diapro.com.tr

Fabrika / Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr



www.diapro.com.tr